


LABORATORY // ZAHNTECHNIK



ROTARY **FINISHING & POLISHING** INSTRUMENTS

ROTIERENDE FINIER- UND POLIERINSTRUMENTE

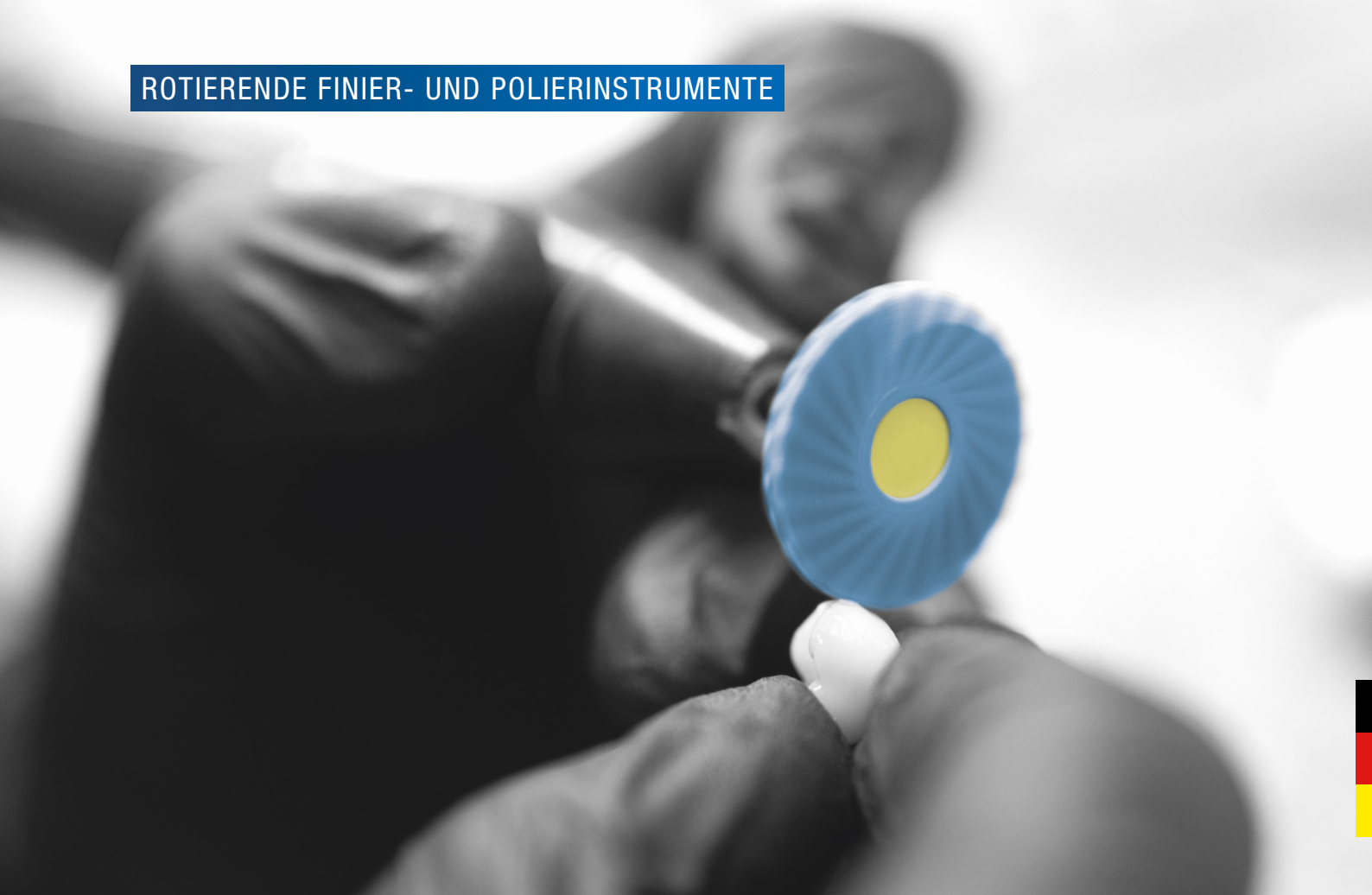

100 YEARS –
**MILLIONS OF
PERFECT SURFACES.**

STILL COUNTING.



100^{years}
anniversary

since 1925

Table of contents

Inhaltsverzeichnis



LABORATORY // ZAHNTECHNIK

GRINDING / SCHLEIFEN		HP
Product group / Produktgruppe	Materials / Materialien	Page / Seite
DIADUR®	Feldspar ceramic Feldspatkeramik	6
DIADUR® <i>black</i>	Feldspar ceramic, Lithium disilicate, Zirconia Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid	6
DIASYNT® <i>plus</i>	Feldspar ceramic, Lithium disilicate, Zirconia Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid	7
DIACON	Feldspar ceramic, Lithium disilicate, Zirconia, NPM alloys Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, NEM-Legierungen	7

FINISHING & POLISHING / FINIEREN & POLIEREN		HP
Product group / Produktgruppe	Materials / Materialien	Page / Seite
DIAPOL®	Feldspar ceramic, Lithium disilicate, Zirconia, Titanium Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid, Titan	8
DIAPOL® – Ceramic Master Set	Feldspar ceramic, Lithium disilicate, Zirconia Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid	9
DIACERAMIC <i>paste</i>	Feldspar ceramic, Lithium disilicate, Zirconia Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, Zirkonoxid	9
DIACERA	Zirconia Zirkonoxid	10
ECOCERAM <i>WG</i>	Zirconia Zirkonoxid	11
DIAPRO	Lithium disilicate Lithium-Disilikat	12
ECOCERAM	Feldspar ceramic Feldspatkeramik	13
DIAPRINT <i>3D</i>	3D Printed resin 3D-Druck-Harz	14
UNIVERSAL	Feldspar ceramic, NPM alloys, Gold Feldspatkeramik, NEM-Legierungen, Gold	14
TECHNIK	Denture acrylics, Thermoforming technology Prothesenkunststoff, Tiefziehtechnik	15
SOFTWHEELS	Denture acrylics, Thermoforming technology, Gold Prothesenkunststoff, Tiefziehtechnik, Gold	16
FIBERWHEELS	Denture acrylics, Thermoforming technology, NPM alloys, Gold Prothesenkunststoff, Tiefziehtechnik, NEM-Legierungen, Gold	16
CHROM <i>plus</i>	NPM alloys, Titanium NEM-Legierungen, Titan	17
SOFTWHEELS <i>GR</i>	NPM alloys, Titanium NEM-Legierungen, Titan	17

MANDRELS & ACCESSORIES / TRÄGER & ZUBEHÖR		
Product group / Produktgruppe		Page / Seite
MANDRELS		18
PLUS Silicone bowls		18

Symbols / Symbole



DIAMOND IMPREGNATED
DIAMANTIERT



RECOMMENDED RPM
EMPFOHLENE DREHZAHL



TO BE USED COUNTERCLOCKWISE
DREHUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN




PACKAGING UNIT
VERPACKUNGSEINHEIT



www.eve-rotary.com/haendler

Want to buy EVE products?
Scan the QR code to find your local supplier.

Sie wollen EVE Produkte kaufen?
Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen Händler.

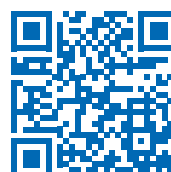

TWIST



ONE SHAPE FOR EVERY SURFACE

Eine Form für jede Oberfläche



One instrument for every dental surface
Ein Instrument für jede Zahnoberfläche



Reduced heat generation
Geringere Wärmeentwicklung



Intuitive application
Intuitive Anwendung



Preservation of the surface structure
Erhaltung der Oberflächenstruktur



Extraordinary durability
Außerordentliche Langlebigkeit



Brilliant polishing results
Brillante Poliererergebnisse



TWIST XT



NEW

ESPECIALLY FOR NARROW SPACES AND FINEST DETAILS

Ideal für schwer zugängliche Bereiche und feinste Details



Super thin and flexible shape
Superdünne und flexible Form



Reduced heat generation
Geringere Wärmeentwicklung



Intuitive application
Intuitive Anwendung



Preservation of the surface structure
Erhaltung der Oberflächenstruktur




Brilliant polishing results in the approximal area
Brillante Poliererergebnisse im Approximalbereich




Which grinder for which porcelain material?

Welcher Schleifer für welche Keramik?

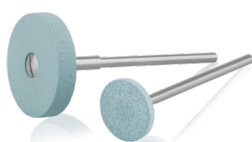

DIADUR®

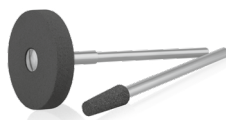

DIADUR® black



DIASYNT® plus



DIACON

Application Anwendung

- ✓ **Feldspar Ceramic**
Feldspatkeramik
- ✗ **Lithium Disilicate**
Lithium-Disilikat
- ✗ **Zirconia**
Zirkonoxid

- ✓ **Feldspar Ceramic**
Feldspatkeramik
- ✓ **Lithium Disilicate**
Lithium-Disilikat
- ✓ **Zirconia**
Zirkonoxid

- ✓ **Feldspar Ceramic**
Feldspatkeramik
- ✓ **Lithium Disilicate**
Lithium-Disilikat
- ✓ **Zirconia**
Zirkonoxid

- ✓ **Feldspar Ceramic**
Feldspatkeramik
- ✓ **Lithium Disilicate**
Lithium-Disilikat
- ✓ **Zirconia**
Zirkonoxid

Composition Zusammensetzung

- ◆ **Diamond abrasive**
Diamant imprägniert
- ✗ **Synthetic binder**
Synthetisches Bindemittel
- ✓ **Ceramic binder**
Keramisches Bindemittel
- ✗ **Hard polyurethane binder**
Hartes Polyurethan-Bindemittel

- ◆ **Diamond abrasive**
Diamant imprägniert
- ✗ **Synthetic binder**
Synthetisches Bindemittel
- ✓ **Ceramic binder**
Keramisches Bindemittel
- ✗ **Hard polyurethane binder**
Hartes Polyurethan-Bindemittel

- ◆ **Diamond abrasive**
Diamant imprägniert
- ✓ **Synthetic binder**
Synthetisches Bindemittel
- ✗ **Ceramic binder**
Keramisches Bindemittel
- ✗ **Hard polyurethane binder**
Hartes Polyurethan-Bindemittel

- ◆ **Diamond abrasive**
Diamant imprägniert
- ✗ **Synthetic binder**
Synthetisches Bindemittel
- ✗ **Ceramic binder**
Keramisches Bindemittel
- ✓ **Hard polyurethane binder**
Hartes Polyurethan-Bindemittel

Characteristics Eigenschaften

- **Stable and durable**
Stabil und langlebig
- **Highly efficient**
Hocheffizient

- **For detailed surface shaping**
Für die detaillierte Ausarbeitung
- **High efficiency and durability**
Hohe Effizienz und Haltbarkeit

- **Very effective material removal**
Sehr effektiver Materialabtrag
- **Reduced heat development**
Reduzierte Wärmeentwicklung

- **Detailed crown margin and veneer trimming**
Präzises Ausdünnen von Veneer- und Kronenrändern

DIADUR®




// FELDSPAR CERAMIC

Feldspatkeramik

- ⊕ **Maintains shape during application**
Formstabil
- ⊕ **Excellent durability**
Hohe Standzeit
- ⊕ **Heat resistant**
Hitzebeständig

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Ceramic / Keramik
Rec. rpm / Empf. U/min	10.000 - 15.000 min ⁻¹

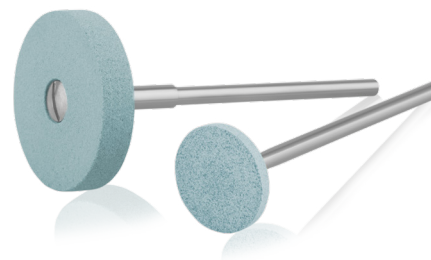

MEDIUM MITTEL

Item / Artikel		DD-22/4m	DD-8m	DD-13m	DD-14m
HP	1 REF	8300Y001	8348X001	8353X001	8354X001
	10 REF	8300Y010	8348X010	8353X010	8354X010
Size / Maße (mm)		Ø 22 x 4,5	Ø 12 x 2	Ø 3,5 x 11	Ø 4,8 x 13

DIADUR® black



// FELDSPAR CERAMIC

Feldspatkeramik

// LITHIUM DISILICATE


Lithium-Disilikat

// ZIRCONIA

Zirkonoxid

- ⊕ **Ceramic bonded diamond grinders for a fine surface pattern**
Keramisch gebundene Schleifer mit feiner Diamantkörnung für feines Schleifbild
- ⊕ **Soft touch for detailed finishing of all types of porcelain**
Weiches Schleifgefühl für die filigrane Ausarbeitung von Keramiken
- ⊕ **Increased removal rate and higher durability**
Erhöhte Abtragsleistung bei gleichzeitig erhöhter Standzeit
- ⊕ **Less heat development due to customised formula**
Geringere Hitzeentwicklung durch angepasste Formel

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Ceramic / Keramik
Rec. rpm / Empf. U/min	10.000 - 15.000 min ⁻¹

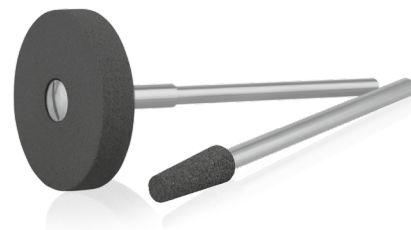

FINE FEIN

Item / Artikel		DDB-22/4f	DDB-17f	DDB-13f	DDB-14f
HP	1 REF	8500Y001	8504Y001	8553X001	8554X001
	10 REF	8500Y010	8504Y010	8553X010	8554X010
Size / Maße (mm)		Ø 22 x 4,5	Ø 15 x 3,5	Ø 3,5 x 11	Ø 4,8 x 13

DIASYNT® plus

DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert

HP



// FELDSPAR CERAMIC // LITHIUM DISILICATE // ZIRCONIA
Feldspatkeramik Lithium-Disilikat Zirkonoxid

SCAN FOR
APPLICATION
VIDEO


- ⊕ High abrasion rate
Hohe Abtragsleistung
- ⊕ Minimised heat development
Minimierte Hitzeentwicklung
- ⊕ Suitable for application without water cooling
Ohne Wasserkühlung anwendbar



Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Synthetic / Kunststoff
Rec. rpm / Empf. U/min	8.000 - 12.000 min ⁻¹

COARSE GROB

Item / Artikel		DYP-22/4g	DYP-8g	DYP-13g	DYP-14g
HP	1 REF	8000Y001	8048X001	8053X001	8054X001
	10 REF	8000Y010	8048X010	8053X010	8054X010
Size / Maße (mm)		Ø 22 x 4	Ø 12 x 2	Ø 4 x 10	Ø 5 x 13

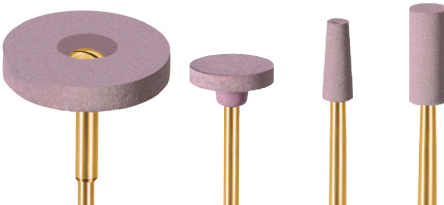

MEDIUM MITTEL

Item / Artikel			DYP-22/4m	DYP-8m	DYP-13m	DYP-14m	
HP		1	REF	8100Y001	8148X001	8153X001	8154X001
		10	REF	8100Y010	8148X010	8153X010	8154X010
Size / Maße (mm)				Ø 22 x 4	Ø 12 x 2	Ø 4 x 10	Ø 5 x 13

DIACON

DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert


HP



// FELDSPAR CERAMIC // LITHIUM DISILICATE // ZIRCONIA // NPM ALLOYS
Feldspatkeramik Lithium-Disilikat Zirkonoxid NEM-Legierungen

SCAN FOR
APPLICATION
VIDEO

- ⊕ For precise reduction of veneer and crown margins
Für das präzise Ausdünnen von Veneer- und Kronenrändern
- ⊕ Precise concentricity minimises the risk of chipping
Exakter Rundlauf minimiert die Gefahr von Abplatzungen
- ⊕ Efficient material reduction whilst resulting in a pre-polished surface
Effizienter Materialabtrag bei gleichzeitiger Vorpolitur der Oberfläche
- ⊕ Low wear due to hard bonding
Geringer Verschleiß durch harte Bindung

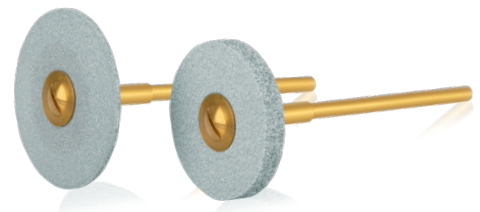

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Rec. rpm / Empf. U/min	10.000 - 15.000 min ⁻¹

DIAPOL®DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert**3** PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte**HP**

// FELDSPAR CERAMIC

Feldspatkeramik

// LITHIUM DISILICATE

Lithium-Disilikat

// ZIRCONIA

Zirkonoxid


// TITANIUM

Titan

- ⊕ **3-step polishing system for all porcelain materials**
3-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
- ⊕ **Diamond grit for highest efficiency**
Diamantkörnung für höchste Effizienz
- ⊕ **Surface corrections without additional glazing**
Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand

Set HP 317
REF 9052
NEW


- 1x: H8Dg | DT-H17Dg
- 1x: H8Dmf | DT-H17Dmf
- 1x: H8D | DT-H17D
- + **DIACON** (Grinding // Schleifen)
DI-R17m
- + **DIASINT® plus** (Grinding // Schleifen)
DYP-13g

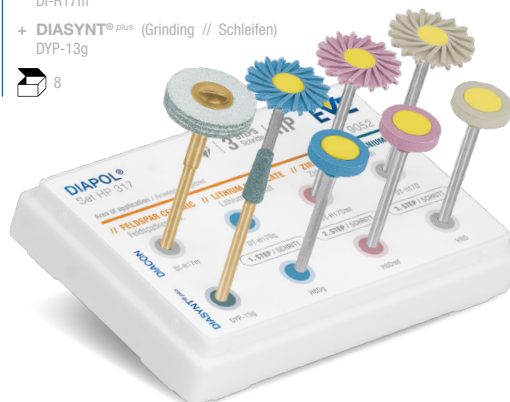

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Rec. rpm / Empf. U/min	7.000 - 12.000 min ⁻¹


 SCAN FOR
APPLICATION
VIDEO
1. STEP

COARSE GROB

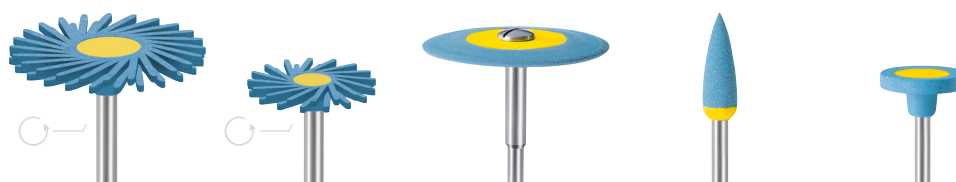

Item / Artikel			DT-H26Dg	DT-H17Dg	L26Dg	H2Dg	H8Dg
HP	1	REF	7066X001	7057X001	7000Y001	7042X001	7048X001
	10	REF	7066X010	7057X010	7000Y010	7042X010	7048X010
Size / Maße (mm)			Ø 26 x 2	Ø 17 x 1,6	Ø 26	Ø 4 x 13	Ø 11,5 x 2

2. STEP

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			DT-H26Dmf	DT-H17Dmf	L26Dmf	H2Dmf	H8Dmf
HP	1	REF	7166X001	7157X001	7100Y001	7142X001	7148X001
	10	REF	7166X010	7157X010	7100Y010	7142X010	7148X010
Size / Maße (mm)			Ø 26 x 2	Ø 17 x 1,6	Ø 26	Ø 4 x 13	Ø 11,5 x 2

3. STEP

FINE FEIN



Item / Artikel			DT-H26D	DT-H17D	L26D	H2D	H8D
HP	1	REF	7266X001	7257X001	7200Y001	7242X001	7248X001
	10	REF	7266X010	7257X010	7200Y010	7242X010	7248X010
Size / Maße (mm)			Ø 26 x 2	Ø 17 x 1,6	Ø 26	Ø 4 x 13	Ø 11,5 x 2

DIAPOL® – Ceramic Master Set

NEW

DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert

HP

PASTE
Paste

// **FELDSPAR CERAMIC** // **LITHIUM DISILICATE** // **ZIRCONIA**
Feldspatkeramik Lithium-Disilikat Zirkonoxid

- ⊕ **A perfectly adapted set for processing all types of ceramic materials**
Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Set für die Bearbeitung aller keramischen Materialien
- ⊕ **Maximum precision and efficiency for optimum processing results due to high-quality diamond instruments**
Maximale Präzision und Effizienz dank hochwertiger Diamantinstrumente für ein optimales Bearbeitungsergebnis
- ⊕ **Easy to use even for challenging detailed applications due to ergonomic design**
Einfache Anwendung auch für anspruchsvolle Detailarbeiten dank ergonomischer Formgebung

Ceramic Master Set HP 300

REF 9055

NEW

DIAPOL®

1x: L26Dg | DT-H17Dg
1x: L26Dmf | DT-H17Dmf
1x: L26D | DT-H17D

+ DIADUR® black DDB-17f
+ DIACON DI-R22m
+ UNIVERSAL white R22
+ DIACERAMIC paste DP-L1
+ GOAT HAIR BRUSH GHB-H19m
+ BUFFING WHEEL CB-H19

12



DIACERAMIC paste

NEW

DIAMOND PASTE
DiamantpastePASTE
Paste

// **FELDSPAR CERAMIC** // **LITHIUM DISILICATE** // **ZIRCONIA**
Feldspatkeramik Lithium-Disilikat Zirkonoxid

- ⊕ **Optimised consistency – adheres ideally and spreads evenly during application**
Optimierte Konsistenz – haftet ideal und verteilt sich gleichmäßig während der Anwendung
- ⊕ **Universally applicable – ideal for all ceramic materials**
Universell einsetzbar – ideal für alle keramischen Werkstoffe
- ⊕ **Diamond formula – maximum efficiency due to high diamond content**
Diamantierte Formel – maximale Effizienz durch hohen Diamantanteil
- ⊕ **Easy application – quick and effortless high-gloss polishing**
Einfache Anwendung – schnelle und mühelose Hochglanzpolitur

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Synthetic / Kunststoff



Item / Artikel	DP-L1
HP 1 REF	9707X001
Content / Inhalt (g)	20

DIACERA



DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert

2 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

HP



// ZIRCONIA

Zirkonoxid

- ⊕ **Especially suitable for monolithic zirconia restorations**
Besonders geeignet für monolithische Zirkoniumdioxid-Restaurationen
- ⊕ **High diamond concentration for more efficiency**
Hohe Konzentration an Diamantkörnung für mehr Effizienz
- ⊕ **Avoids repeated glazing after corrections**
Erspart erneuten Glanzbrand nach Korrekturen
- ⊕ **Before polishing, grinding with DIASYN[®] plus or DIACON**
Vor der Politur Schleifen mit DIASYN[®] plus oder DIACON

Set HP 327


REF 9053



1x: H8DCmf | DT-H17DCmf
1x: H8DC | DT-H17DC

+ **DIACON** (Grinding // Schleifen)
DI-R17m

+ **DIASYN[®] plus** (Grinding // Schleifen)
DYP-13g

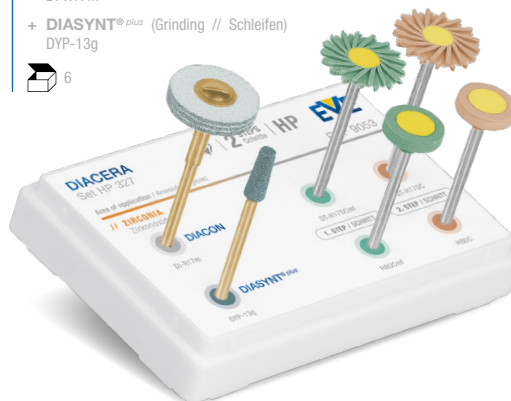

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Rec. rpm / Empf. U/min	⊕ 7.000 - 10.000 min ⁻¹



SCAN FOR
APPLICATION
VIDEO

1. STEP

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			DT-H26DCmf	DT-H17DCmf	L26DCmf	H2DCmf	H8DCmf
HP	1	REF	7666X001	7657X001	7600Y001	7642X001	7648X001
	10	REF	7666X010	7657X010	7600Y010	7642X010	7648X010
Size / Maße (mm)			Ø 26 x 2	Ø 17 x 1,6	Ø 26	Ø 4 x 13	Ø 11,5 x 2

2. STEP

FINE FEIN



Item / Artikel			DT-H26DC	DT-H17DC	L26DC	H2DC	H8DC
HP	1	REF	7766X001	7757X001	7700Y001	7742X001	7748X001
	10	REF	7766X010	7757X010	7700Y010	7742X010	7748X010
Size / Maße (mm)			Ø 26 x 2	Ø 17 x 1,6	Ø 26	Ø 4 x 13	Ø 11,5 x 2

ECOCERAM^{WG}


2 PROCESSING STEPS
 Bearbeitungsschritte

HP


// ZIRCONIA

Zirkonoxid

- ⊕ **Polishing pre-sintered zirconia simplifies finishing after final sintering**
 Politur des Weißlings reduziert Bearbeitungszeit im gesinterten Zustand
- ⊕ **No contamination of zirconia, as no colour pigments are used**
 Kein Eintrag von Farbpartikeln in den Weißling, da keine Farbpigmente verwendet werden
- ⊕ **Developed for the lower strength of pre-sintered zirconia**
 Angepasst an die geringe Eigenfestigkeit von nicht gesintertem Zirkonoxid

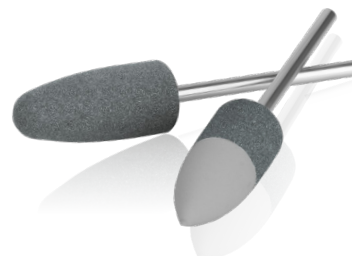

Grit / Körnung	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Binder / Bindung	Silicone / Silikon
Rec. rpm / Empf. U/min	4.000 - 7.000 min ⁻¹


 SCAN FOR
 APPLICATION
 VIDEO

1. STEP

Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel				H334Km-WG	H338m-WG
HP		10	REF	2834X010	2838X010
		100	REF	2834X100	2838X100
Size / Maße (mm)				Ø 10 x 24	Ø 5,5 x 16

2. STEP

Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel				H334Kf-WG	H338f-WG
HP		10	REF	2934X010	2938X010
		100	REF	2934X100	2938X100
Size / Maße (mm)				Ø 10 x 24	Ø 5.5 x 16

2-in-1 Polisher

2-in-1 Polierer

1. STEP

MEDIUM MITTEL



2. STEP

FINE FEIN



Item / Artikel			H332-WG	H338-WG
HP		10 REF	2832X010	2839X010
		100 REF	2832X100	2839X100
Size / Maße (mm)			Ø 10 x 24.5	Ø 6 x 16.5

DIAPRO

DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert2 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

HP




// LITHIUM DISILICATE

Lithium-Disilikat

- ⊕ Especially suitable for silicate porcelain
Speziell für Silikatkeramiken
- ⊕ Diamond grit for highest efficiency
Diamantkörnung für höchste Effizienz
- ⊕ Polishing result matches glazing
Polierergebnis entspricht Glanzbrand
- ⊕ Before polishing, grinding with DIASYN[®] plus or DIACON
Vor der Politur Schleifen mit DIASYN[®] plus oder DIACON

Set HP 367

REF 9054

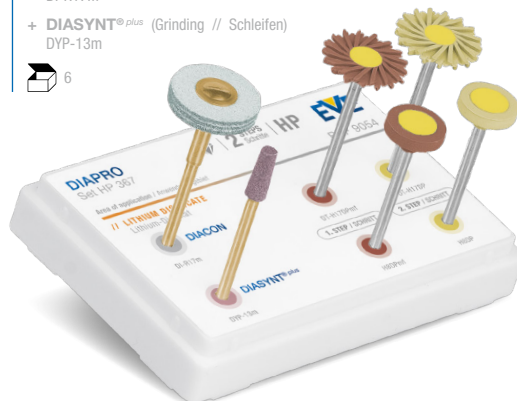1x: H8DPmf | DT-H17DPmf
1x: H8DP | DT-H17DP+ DIACON (Grinding // Schleifen)
DI-R17m+ DIASYN[®] plus (Grinding // Schleifen)
DYP-13m

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Rec. rpm / Empf. U/min	7.000 - 12.000 min ⁻¹

SCAN FOR
APPLICATION
VIDEO

1. STEP

Schritt

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			DT-H26DPmf	DT-H17DPmf	L26DPmf	H2DPmf	H8DPmf
HP	1	REF	7866X001	7857X001	7800Y001	7842X001	7848X001
	10	REF	7866X010	7857X010	7800Y010	7842X010	7848X010
Size / Maße (mm)			Ø 26 x 2	Ø 17 x 1,6	Ø 26	Ø 4 x 13	Ø 11,5 x 2

2. STEP

Schritt

FINE FEIN



Item / Artikel			DT-H26DP	DT-H17DP	L26DP	H2DP	H8DP
HP	1	REF	7966X001	7957X001	7900Y001	7942X001	7948X001
	10	REF	7966X010	7957X010	7900Y010	7942X010	7948X010
Size / Maße (mm)			Ø 26 x 2	Ø 17 x 1,6	Ø 26	Ø 4 x 13	Ø 11,5 x 2

ECOCERAM

3 PROCESSING STEPS
 Bearbeitungsschritte


HP 

// FELDSPAR CERAMIC

Feldspatkeramik

- ⊕ **For finishing and polishing porcelain restorations**
Zum Glätten und Polieren von Keramikrestorationen
- ⊕ **Silicone bonding adapts to the surface being processed**
Silikonbindung passt sich der Oberfläche an

Grit / Körnung	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Binder / Bindung	Silicone / Silikon
Rec. rpm / Empf. U/min	7.000 - 15.000 min ⁻¹

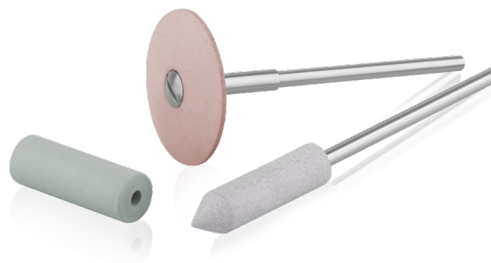

1. STEP

COARSE GROB



Item / Artikel		R22VK	LS22VK
HP 	10 REF	1500X010	1501X010
	100 REF	1500X100	1501X100
Size / Maße (mm)		Ø 22 x 3	Ø 22

2. STEP

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel		R22NK	LS22NK
HP 	10 REF	1600X010	1601X010
	100 REF	1600X100	1601X100
Size / Maße (mm)		Ø 22 x 3	Ø 22

3. STEP

FINE FEIN



Item / Artikel		R22SK	LS22SK
HP 	10 REF	1700X010	1701X010
	100 REF	1700X100	1701X100
Size / Maße (mm)		Ø 22 x 3	Ø 22

DIAPRINT 3D

DIAMOND IMPREGNATED
Diamantiert2 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte


HP



// 3D PRINTED RESIN

3D-Druck-Harz


- ⊕ **Hard polyurethane binder with fine diamond grit ensures removal and pre-polishing in the first step**
Harte Polyurethan Bindung mit feiner Diamantkörnung sorgt für Abtrag und Vorpulitur in einem Schritt
- ⊕ **Soft silicone binder in the final step requires low speed and low pressure**
Weiche Silikonbindung im letzten Schritt erfordert niedrigere Geschwindigkeit und niedrigeren Druck
- ⊕ **Ergonomic design for precise, effortless application**
Ergonomisches Design für präzise, mühelose Anwendung

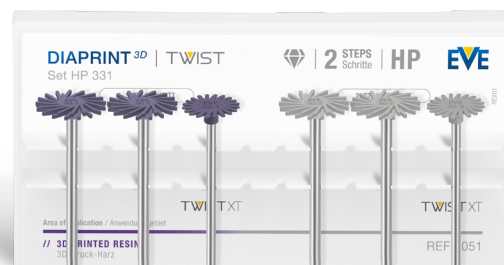Set HP 331
REF 90512x: 3DT-H17m | 3DT-H17f
1x: 3DT-HXT14m | 3DT-HXT14f

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
1. Step / Schritt	Silicone / Silikon
2. Step / Schritt	
Rec. rpm / Empf. U/min	3.000 - 7.000 min ⁻¹

1. STEP
Schritt


MEDIUM MITTEL

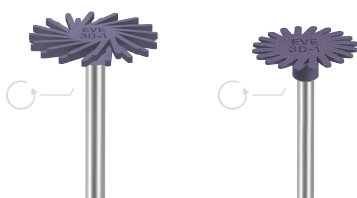

Item / Artikel	3DT-H17m	3DT-HXT14m
HP 1 REF	6117X001	6102X001
10 REF	6117X010	6102X010
Size / Maße (mm)	Ø 17 x 1,8	Ø 14

2. STEP
Schritt

FINE FEIN

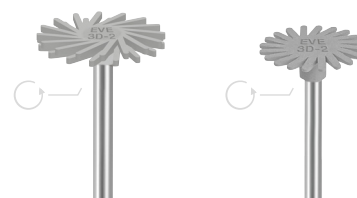

Item / Artikel	3DT-H17f	3DT-HXT14f
HP 1 REF	6217X001	6202X001
10 REF	6217X010	6202X010
Size / Maße (mm)	Ø 17 x 1,8	Ø 14

UNIVERSAL

HP

// FELDSPAR CERAMIC
Feldspatkeramik// NPM ALLOYS
NEM-Legierungen// GOLD
Gold

- ⊕ **Soft silicone bonding adapts to the surface being processed**
Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
- ⊕ **For polishing all dental materials**
Poliert alle dentalen Restaurationmaterialien
- ⊕ **Various shapes for different applications**
Diverse Formen für verschiedene Anwendungen

Grit / Körnung	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Binder / Bindung	Silicone / Silikon
Rec. rpm / Empf. U/min	7.000 - 10.000 min ⁻¹

COARSE GROB



Item / Artikel	R22	L22	S6	C7
HP 10 REF	1000X010	1001X010	1016X010	1017X010
100 REF	1000X100	1001X100	1016X100	1017X100
Size / Maße (mm)	Ø 22 x 3	Ø 22	Ø 6 x 24	Ø 7 x 20

TECHNIK

3 PROCESSING STEPS
BearbeitungsschritteHP 

// DENTURE ACRYLICS // THERMOFORMING TECHNOLOGY

Prothesenkunststoff

Tiefziehtechnik

⊕ For smoothing, pre-polishing and polishing

Zum Glätten, Vorpolieren und Polieren

⊕ Various shapes for different areas of application

Diverse Formen für verschiedene Anwendungsbereiche

Set HP 115

REF 9044

1x: H332K | H334K | H338 | H336K
1x: H332Km | H334Km | H338m | H336Km
1x: H332Kf | H334Kf | H338f | H336Kf 12SCAN FOR
APPLICATION
VIDEO

1. STEP

COARSE GROB



Item / Artikel			H332K	H334K	H338
HP 	10	REF	2032X010	2034X010	2038X010
	100	REF	2032X100	2034X100	2038X100
Size / Maße (mm)			Ø 10 x 20	Ø 10 x 24	Ø 5,5 x 16

2. STEP

MEDIUM MITTEL



Item / Artikel			H332Km	H334Km	H338m
HP 	10	REF	2132X010	2134X010	2138X010
	100	REF	2132X100	2134X100	2138X100
Size / Maße (mm)			Ø 10 x 20	Ø 10 x 24	Ø 5,5 x 16

3. STEP

FINE FEIN



Item / Artikel			H332Kf	H334Kf	H338f
HP 	10	REF	2232X010	2234X010	2238X010
	100	REF	2232X100	2234X100	2238X100
Size / Maße (mm)			Ø 10 x 20	Ø 10 x 24	Ø 5,5 x 16

SOFTWHEELS



// DENTURE ACRYLICS

Prothesenkunststoff

// THERMOFORMING TECHNOLOGY

Tiefziehtechnik

// GOLD

Gold

- ⊕ **Impregnated with polishing media**
Imprägniert mit Poliermedium
- ⊕ **Application without additional polishing paste**
Anwendung ohne zusätzliche Polierpaste
- ⊕ **Adapts to uneven surfaces**
Passt sich an unebene Oberflächen an

Set HP 125
REF 9045**TECHNIK**

1x: H334K | H334Km | H334Kf

+ **UNITRIM** (Shaping / Abtragen)

1x: UT-H334K

+ **SOFTWHEELS**


(High-Shine Polishing /

Hochglanzpolieren)

1x: SW-R22m | SW-R22f

+ **MANDREL**

1x: 78HP

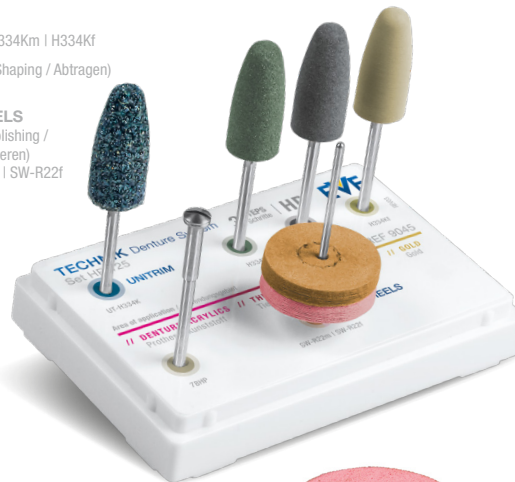

Grit / Körnung	Aluminium oxide / Aluminiumoxid
Fiber / Faser	Fleece fabric / Vlies-Stoff
Rec. rpm / Empf. U/min	5.000 - 7.000 min ⁻¹

SCAN FOR
APPLICATION
VIDEO

MEDIUM MITTEL



FINE FEIN



Item / Artikel	SW-R22m
HP 10 REF	9801X010
HP 100 REF	9801X100
Size / Maße (mm)	Ø 22 x 3

Item / Artikel	SW-R22f
HP 10 REF	9802X010
HP 100 REF	9802X100
Size / Maße (mm)	Ø 22 x 3

FIBERWHEELS

3 PROCESSING STEPS
Bearbeitungsschritte

// DENTURE ACRYLICS

Prothesenkunststoff

// THERMOFORMING TECHNOLOGY

Tiefziehtechnik

// NPM ALLOYS

NEM-Legierungen

// GOLD


Gold

- ⊕ **Low heat development due to open-pore structure**
Geringe Wärmeentwicklung durch offenporige Struktur
- ⊕ **High flexibility for contoured and curved surfaces**
Hohe Flexibilität für stark konturierte und gebogene Oberflächen
- ⊕ **Ideally suited for processing of mouthguards**
Optimal zur Bearbeitung von Mundschutzen geeignet

Grit / Körnung	
1. Step / Schritt	Silicon carbide / Siliziumcarbid
2. Step / Schritt	Aluminium oxide / Aluminiumoxid
3. Step / Schritt	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Fiber / Faser	Nonwoven Fiber / Faservlies
Rec. rpm / Empf. U/min	5.000 - 7.000 min ⁻¹

SCAN FOR
APPLICATION
VIDEO**1. STEP**
Schritt


COARSE GROB

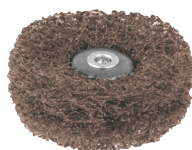**2. STEP**
Schritt

MEDIUM MITTEL

**3. STEP**
Schritt

FINE FEIN

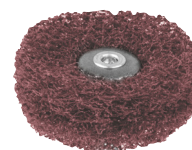

Item / Artikel	FI-H26g	FI-H26m	FI-H26f
HP 10 REF	9851X010	9852X010	9853X010
HP 100 REF	9851X100	9852X100	9853X100
Size / Maße (mm)	Ø 25	Ø 25	Ø 25

CHROM^{plus}

3 PROCESSING STEPS
 Bearbeitungsschritte

HP 
// NPM ALLOYS // TITANIUM

NEM-Legierungen

Titan

- ⊕ **Removal of casting skin and pre-polishing with CHROM^{plus}**
 Abtragen der Gusshaut und Vorpolitur mit CHROM^{plus}
- ⊕ **Final high-shine polishing with SOFTWHEELS^{GR}**
 (applicable without polishing paste)
 Finale Hochglanzpolitur mit SOFTWHEELS^{GR}
 (anwendbar ohne Polierpaste)

Grit / Körnung	Silicon carbide / Siliziumcarbid
Binder / Bindung	Polyurethane / Polyurethan
Rec. rpm / Empf. U/min	8.000 - 15.000 min ⁻¹


Set HP 220
 REF 9046

 2x: CRP-R22m | CRP-R22f
 3x: CRP-LS22m | CRP-LS22f

 + **CERASTONE**
 (Shaping / Abtragen)
 1x: CSP-HP-731




 + **SOFTWHEELS**
 (High-Shine Polishing /
 Hochglanzpolieren)
 2x: SW-R22GR

 + **MANDREL**
 1x: 78HP

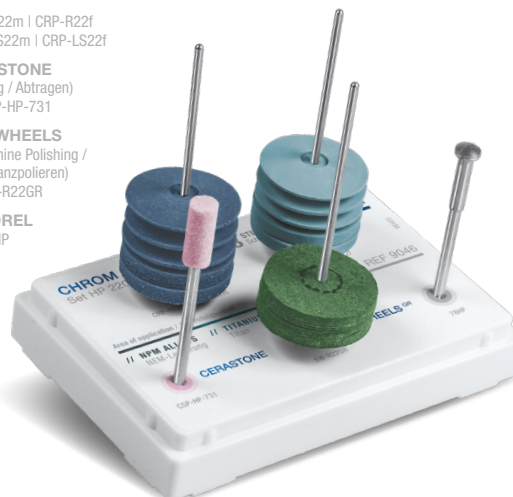 14

 SCAN FOR
 APPLICATION
 VIDEO

1. STEP
 Schritt

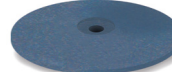
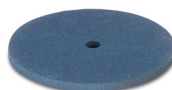
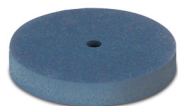
COARSE GROB



Item / Artikel			CRP-R22m	CRP-R22/1m	CRP-LS22m	CRP-C6m
HP 	10	REF	4000X010	4002X010	4001X010	4017X010
	100	REF	4000X100	4002X100	4001X100	4017X100
Size / Maße (mm)			Ø 22 x 3	Ø 22 x 1	Ø 22	Ø 6 x 22

2. STEP
 Schritt

MEDIUM MITTEL

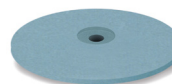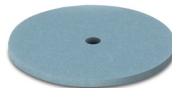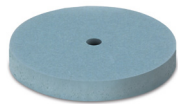


Item / Artikel			CRP-R22f	CRP-R22/1f	CRP-LS22f	CRP-C6f
HP 	10	REF	4100X010	4102X010	4101X010	4117X010
	100	REF	4100X100	4102X100	4101X100	4117X100
Size / Maße (mm)			Ø 22 x 3	Ø 22 x 1	Ø 22	Ø 6 x 22

SOFTWHEELS^{GR}

Grit / Körnung	Chromium oxide / Chromoxid
Fiber / Faser	Fleece fabric / Vlies-Stoff
Rec. rpm / Empf. U/min	5.000 - 7.000 min ⁻¹

3. STEP
 Schritt

FINE FEIN

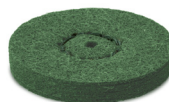

Item / Artikel			SW-R22GR
HP 	10	REF	9803X010
	100	REF	9803X100
Size / Maße (mm)			Ø 22 x 3

MANDRELS



// MANDRELS

Träger

⊕ **Stainless steel precision mandrels for unmounted polishers**

Präzisionsträger aus Edelstahl für unmontierte Polierer



						
Item / Artikel			61HP	77HP	78HP	88HP
HP	 3	REF	9551X003	9552X003	9553X003	9555X003
	10	REF	9551X010	9552X010	9553X010	9555X010
	100	REF	9551X100	9552X100	9553X100	9555X100
Screw size / Maße Schraube (mm)			—	5	5	8
Shaft diameter / Schaftdurchmesser (mm)			Ø 2,35	Ø 2,35	Ø 2,35	Ø 2,35

PLUS

// SILICONE BOWLS

Silikonbecher

⊕ **Flexible bowls for mixing plaster, investment materials, alginate and other materials**

Flexible Becher zum Anmischen von Gips, Einbettmassen, Alginat und anderen Materialien



Item / Artikel		PLUS200	PLUS400	PLUS600
	1 REF	9600X001	9601X001	9602X001
Volume / Volumen (ml)		200	400	600

100 years
anniversary



Please note that this brochure does only include part of the extensive range of rotary finishing and polishing instruments. For more information visit www.eve-rotary.com.

Bitte beachten Sie, dass diese Broschüre nur einen Teil des umfangreichen Sortiments an rotierenden Finier- und Polierinstrumenten enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie www.eve-rotary.com.

since 1925



www.eve-rotary.com/haendler

**Want to buy EVE products?
Scan the QR code to find your local supplier.**

Sie wollen EVE Produkte kaufen?
Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen Händler.



Perfect Surfaces.

EVE Ernst Vetter GmbH · Neureutstr. 6 · 75210 Keltern, Germany

+49 (0) 72 31 97 77 -0 @ info@eve-rotary.com www.eve-rotary.com



**Scan the QR code to
download the pdf**

Jetzt als PDF herunterladen

